


CONOLOG®
SYSTEM



CONOLOG®
PROGRESSIVE-LINE IMPLANTATE
MIT VERSCHRAUBTEM
EINBRINGPFOSTEN

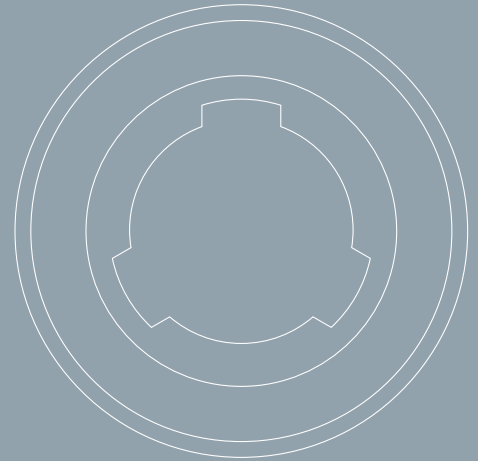

Gültig ab Juli 2019

a perfect fit™

camlog

CONELOG® PROGRESSIVE-LINE IMPLANTATE

NEU

CONELOG® PROGRESSIVE-LINE IMPLANTATE

Mit den neuen CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantaten können moderne Behandlungskonzepte wie die Sofortversorgung oder Sofortbelastung, die eine hohe Primärstabilität erfordern, einfacher umgesetzt werden.

Die Geometrie des Implantats ist konsequent darauf ausgerichtet, eine hohe initiale Stabilität zu entwickeln:

- Das selbstschneidende Schraubenimplantat verfügt über einen konisch ausgeformten apikalen Bereich, der eine ausgeprägte Primärstabilität auch in weichem Knochen ermöglicht.
- Bis zum Apex reichendes Gewinde für eine gute Verankerung bei Sofortimplantationen.
- Parallelwandiger Bereich des Implantatkörpers für mehr Flexibilität der vertikalen Position.
- Krestales Gewinde für verbesserten Halt bei begrenzter Knochenhöhe.

CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantate sind mit der gestrahlten, säuregeätzten Promote® Oberfläche erhältlich, die sich über den gesamten Implantatkörper bis zur säuregeätzten konischen 45° Implantatschulter erstreckt. Diese Oberflächengestaltung erlaubt somit je nach klinischer Situation eine epikrestale oder leicht subkrestale Implantatpositionierung im Sinne eines klassischen Bone-level-Implantats.


CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantate verfügen über die hochpräzise, konische CONELOG® Implantat-Abutment-Verbindung mit integriertem Platform Switching.

Die prothetische Versorgung erfolgt mit CONELOG® Abutments.



PROMOTE® PLUS

IMPLANTATDURCHMESSER

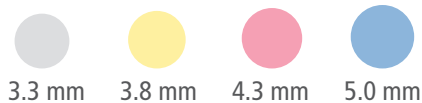


3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm

IMPLANTATLÄNGEN



7 mm 9 mm 11 mm 13 mm 16 mm

PROGRESSIVE-LINE IMPLANTATE MIT VERSCHRAUBTEM EINBRINGPFOSTEN

	Artikel	Art.-Nr.	Ø	L	A Ø
	CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat, Promote® plus inkl. verschraubtem Einbringpfosten und Verschlusschraube, steril Material Titan Grade 4	C1085.3309	3.3 mm	9 mm	2.2 mm
		C1085.3311		11 mm	
		C1085.3313		13 mm	
		C1085.3316		16 mm	
		C1085.3807	3.8 mm	7 mm	3.0 mm
		C1085.3809		9 mm	
		C1085.3811		11 mm	
		C1085.3813	3.8 mm	13 mm	2.7 mm
		C1085.3816		16 mm	
		C1085.4307		7 mm	3.0 mm
		C1085.4309	9 mm		
		C1085.4311	4.3 mm	11 mm	2.7 mm
		C1085.4313		13 mm	
		C1085.4316		16 mm	
		C1085.5007	5.0 mm	7 mm	3.5 mm
		C1085.5009		9 mm	
		C1085.5011		11 mm	3.2 mm
		C1085.5013	13 mm		
		C1085.5016	16 mm		

Wahlweise sind die CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Implantate auch mit gesteckten Einbringpfosten erhältlich (siehe «PRODUKTKATALOG CONELOG® IMPLANTATSYSTEM, gültig ab März 2019»).

WEITERGEHENDE DOKUMENTATIONEN

WEITERGEHENDE INFORMATIONEN ZU DEN CONELOG® PRODUKTEN SIND IN FOLGENDEN DOKUMENTATIONEN ZU FINDEN:

- CONELOG® Produktkatalog
- CONELOG® Arbeitsanleitungen
- CONELOG® Gebrauchsanweisungen
- Aufbereitungsanweisung
- CAMLOG Literaturübersicht
- CAMLOG und Wissenschaft


Die Dokumente sind bei der jeweiligen CAMLOG Landesvertretung erhältlich.

Siehe auch unter:

<https://ifu.camlog.com>

www.camlog.com

CE0123

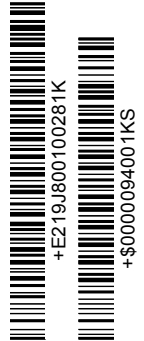

Art.-Nr. J8001.0028 Rev. 00 07/2019

WARENNAMEN UND COPYRIGHT

Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht gesondert kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann NICHT geschlossen werden, dass es sich um einen ungeschützten Warennamen handelt. Das Dokument, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Sie können sich den Inhalt zum persönlichen nichtkommerziellen Gebrauch herunterladen, Änderungen oder Reproduktion des Inhalts sind allerdings verboten. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der CAMLOG Biotechnologies GmbH unzulässig und kann strafrechtlich verfolgt werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Die Beschreibungen in dieser Produktinformation reichen zur sofortigen Anwendung des CONELOG® Implantatsystems nicht aus. Die Einweisung in die Handhabung des CONELOG® Implantatsystems durch einen darin erfahrenen Operateur wird empfohlen.

Verpackungseinheiten: Sofern nicht anders beschrieben, liegt der Verpackung je ein Produkt bei.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.

ÖSTERREICH

ALLTEC Dental-GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich

Telefon +43 5572 37 23 41 | Fax +43 5572 37 23 41 404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at

HEADQUARTERS

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz

Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.camlog.com