

Implantatversorgung

Perioprothetik

Abutments, Gingivaformer



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast (bei Wax up / aufgestelltem Zahn nicht notwendig)	
3	Abnehmbare Zahnfleischmaske	
4	Implantatplattform freigelegt	
5	ausgeformtes Emergenzprofil	
6	Angaben wieviel Druck auf die vorbereitete Gingiva ausgeübt werden soll	
7	Angaben wie die zervikale Stufe angelegt werden soll	
8	Prothesenzahn aufgestellt - in diesen wird hineinkonstruiert	
9	Alternativ: Wax up des Abutments	
Hinweis: Gegenbiss in Ausnahmefällen		

Gerüste




1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast / eingegipst auf Sockel	
3	Modelle mit herausnehmbaren und vorbereiteten Stümpfen	
4	Präparationsgrenzen eindeutig markiert	
5	Stümpfe ausgeblockt	
6	Aufstellung eines Prothesenzahnes / bzw. Wax up bei den Brückengliedern	

Verschraubte Brücken



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast / eingegipst auf Sockel	
3	Abnehmbare Zahnfleischmaske	
4	Implantatplattform freigelegt	
5	ausgeformtes Emergenzprofil	
6	Angaben wieviel Druck auf die vorbereitete Gingiva ausgeübt werden soll	
7	Angaben wie die zervikale Stufe angelegt werden soll	
8	Wax up / Mock up	

Gerüste anatomisch reduziert

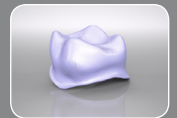

1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast	
3	Modelle mit herausnehmbaren und vorbereiteten Stümpfen	
4	Präparationsgrenzen eindeutig markiert	
5	Stümpfe ausgeblockt	
6	Wax up / Mock up	

Stegversorgungen



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast (bei Mock up / Aufstellung nicht notwendig)	
3	Abnehmbare Zahnfleischmaske	
4	Implantatplattform freigelegt	
5	Angaben zu Pfeilergestaltung (zylindrisch od. zervikale Stufe)	
6	Angaben wieviel Druck auf die vorbereitete Gingiva ausgeübt werden soll	
7	bei angelegter zervikaler Stufe - Angaben wie tief die zervikale Stufe angelegt werden soll	
8	Aufstellung auf abnehmbaren, fester Basis	
9	Alternativ: Wax up / Mock up	
10	Angaben zu Stegprofil und Position der Attachments	
Hinweis: Gegenbiss in Ausnahmefällen		

Vollanatomische Strukturen



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast	
3	Modelle mit herausnehmbaren und vorbereiteten Stümpfen	
4	Präparationsgrenzen eindeutig markiert	
5	Stümpfe ausgeblockt	
6	bei größeren Konstruktionen Wax up / Mock up	
7	Angaben zur Kontaktpunktgestaltung	
8	Angaben zum Kontaktpunktgestaltung zum Antagonisten	